

Bolsa resucitadora manual

Propósito

La bolsa resucitadora manual se usa para darle respiraciones adicionales a su hijo.

Use la bolsa después de succionar o cuando necesite ayuda para respirar.

La bolsa resucitadora también incluye una mascarilla. La mascarilla debe cubrir la boca y la nariz. El tamaño de la mascarilla se debe cambiar conforme su hijo crece.



Bolsa Resucitadora

Uso de la bolsa


1. Conecte la bolsa resucitadora a la cánula de traqueotomía.

Si su hijo...	Entonces...
respira por sí solo	Oprima la bolsa resucitadora tan pronto como su hijo comience a inhalar.
no respira por sí solo	Oprima la bolsa al mismo ritmo que el respirador.

2. Mientras oprime la bolsa, observe cómo sube el pecho de su hijo.
3. Tan pronto como suba el pecho de su hijo, suelte la bolsa.
4. Repita este ciclo de oprimir y soltar hasta que su hijo vuelva a su propio estado basal.

Si a su hijo...	Entonces...
se le recetó oxígeno ...	úsela cuando le dé respiraciones manualmente a su hijo a un ritmo de 3 a 5 litros por minuto.
no le han recetado oxígeno ...	mantenga a su hijo en el aire de la habitación.

Limpeza de la bolsa

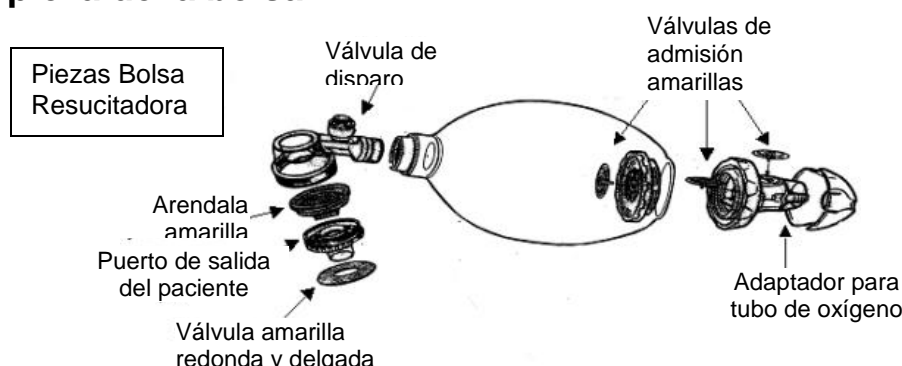

1. Una vez a la semana desmonte la bolsa resucitadora.
2. Lave todos los componentes con agua tibia y jabón.
3. Desinfecte todas las piezas usando una mezcla de agua de la llave con vinagre (3/4 de galón de vinagre por 1 galón de agua).
4. Enjuague bien todas las piezas con agua de la llave.
5. Seque al aire completamente todas las piezas.
6. Vuelva a armar la bolsa. (Siga el diagrama de la derecha).
7. Verifique para asegurarse de que la bolsa funcione correctamente bloqueando el puerto de salida del paciente (la parte que se conecta con la cánula de traqueotomía).
En la bolsa de tamaño infantil, oprima la válvula de disparo.
8. Apriete la bolsa.

Si la bolsa ...	Entonces...
se desinfla ...	Verifique que todas las conexiones estén apretadas. Verifique que las arandelas amarillas estén planas y que no estén perforadas.
no se desinfla ...	La bolsa se ha vuelto a armar correctamente.

Instrucciones especiales

- Siempre tenga la bolsa en la misma habitación donde está su hijo.
- Tenga siempre una bolsa resucitadora de repuesto en la BOLSA DE VIAJE.
- Asegúrese de que su hijo tenga una bolsa resucitadora cuando se esté limpiando la otra bolsa.
- Si alguna de las arandelas están perforadas o rasgadas, llame su proveedor de atención domiciliaria.

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene cualesquier preguntas o inquietudes o si su hijo tiene necesidades especiales de cuidados médicos que no se cubrieron en esta información.

Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento.